

Aan de slag met de Instinct-sensor

De kleinste sensor ter wereld[†] met een opwarmperiode van 1 uur. Gemakkelijk te gebruiken en tot maximaal 15 dagen comfortabel te dragen.¹ Geen vingerprikmetingen nodig dankzij de SmartGuard™-technologie.[‡]

Inbrengplaats: **Achterkant van de bovenarm voor personen van 2 jaar en ouder** bij gebruik met het MiniMed 780G-systeem.

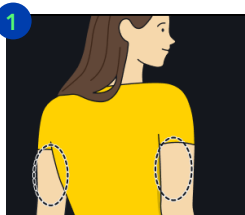
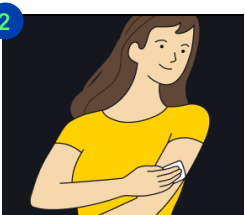
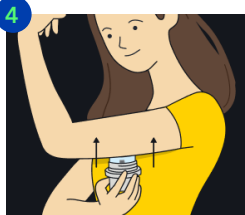
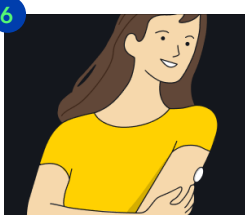
Voor een optimale verbinding kun je de pomp en de Instinct-sensor het beste aan dezelfde kant van het lichaam dragen. De infusieset kan aan beide kanten worden gedragen.

De Instinct-sensor mag **ALLEEN** aan de achterkant van de bovenarm worden gedragen. Draag de hulpmiddelen niet op plekken met littekens, moedervlekken, striae of knobbels. Kies een vlak gebied dat niet wordt gebogen en dat minimaal 2,5 cm (1 inch) van insuline-injectieplaatsen ligt.

De sensor starten: volg de instructies in de app of bekijk de onderstaande stappen ter referentie.

1. Tik op het pictogram van de **MiniMed Mobile-app** op je compatibele mobiele apparaat.
2. Tik op de **Menu-toets**  (drie balkjes linksboven in het beginscherm) om het menu te openen.
3. Tik op **Sensor starten**, gevolgd door **Ja, Instinct**.

De sensor aanbrengen: volg de app of gebruik de instructies hieronder om de sensor aan te brengen.

1.  Kies een inbrengplaats op de achterkant van de bovenarm.
2.  Was de plek met gewone zeep, droog deze af, reinig met een alcoholdoekje en laat de plek vervolgens aan de lucht drogen.
3.  Draai de dop van de sensorapplicator.
4.  Plaats de sensorapplicator op de inbrengplaats. Druk er stevig op om de sensor aan te brengen.
5.  Trek de sensorapplicator voorzichtig van je lichaam af.
6.  Controleer of de sensor stevig is aangebracht.

[†] Voordat je een nieuwe sensor start, moet je een compatibele telefoon met je pomp koppelen met behulp van de MiniMed Mobile-app. Controleer hier of je telefoon compatibel is: <https://www.medtronic-diabetes.com/nl-NL/compatibiliteit-app-controleren>. Als je geen compatibele telefoon hebt, bel dan onze WeCare technische ondersteuningsdienst op 0800 34 22 338.



De MiniMed™ Mobile-app is vereist om de Instinct-sensor te kunnen starten met je compatibele MiniMed™ 780G-pomp.[§]



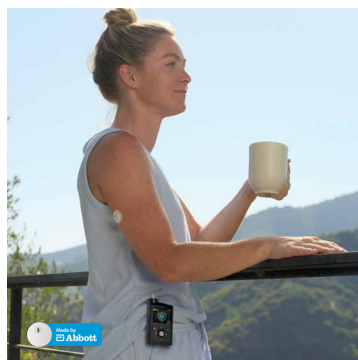
Download on the
App Store

<https://shorturl.at/IY4sJ>



GET IT ON
Google Play

<https://shorturl.at/C3plZ>



Video over het
inbrengen van de
sensor.

De sensor starten: Volg de instructies in je app om de sensor te scannen. Zie de onderstaande stappen ter referentie.



Selecteer in de app de optie Volgende.

Selecteer Nieuwe sensor scannen.

Zorg ervoor dat je pomp op het beginscherm staat. Houd je mobiele apparaat in de buurt van de sensor totdat deze begint te piepen of trillen.

Opmerking: Houd de pomp in de buurt van de sensor totdat het koppelen is voltooid. Zodra je Instinct-sensor is gestart, begint de opwarmperiode van 1 uur.

Specifieke software-updates voor de Instinct-sensor

Sensorlevensduurpictogram	De sensor kan maximaal 15 dagen worden gebruikt. Nog 1 dag over Uitgewerkt	Sensor binnenkort ten einde 10:00 Sensorgebruiksduur eindigt over minder dan [24/X] uur. Gebruik de MiniMed Mobile-app om binnenkort een nieuwe sensor te starten. OK	Verschijnt tegen het einde van de levensduur van de sensor. Houd een vervangende sensor bij de hand.
Sensortemperatuur	Sensor te heet 10:00 Sensorglucose niet beschikbaar omdat sensor te warm is. Monitor BG. OK	Verschijnt wanneer de sensor te warm of te koud is om een meetwaarde te kunnen geven. Verplaats de sensor naar een comfortabele temperatuur en controleer over een paar minuten opnieuw.	



Heb je verdere ondersteuning nodig?
Bel ons op 0800 34 22 338



Als je meer dan 1000 mg vitamine C per dag inneemt, kan dit ten onrechte je sensorwaarden verhogen, waardoor je een hypo kunt missen. Vitamine C is te vinden in supplementen, waaronder multivitaminen en middelen tegen verkoudheid. Overleg met je zorgverlener om te begrijpen hoelang vitamine C actief blijft in je lichaam.

† Onder door de patiënt aangebrachte sensoren.

‡ Vingerprikmetingen zijn vereist in de Manuele modus en om SmartGuard™ te starten. Als de symptomen niet overeenkomen met de alarmmeldingen en meetwaarden, moet je een vingerprikmeting gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Deelnemers aan het hoofdonderzoek besteden gemiddeld > 93% in SmartGuard™.

1. Alva S et al. Diabetes Ther. 2023;14:767-776.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie in dit document is geen medisch advies en mag niet worden gebruikt als een alternatief voor overleg met je zorgprofessional. Bespreek indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke bijwerkingen en eventuele verdere informatie met je zorgprofessional. Het beoogde gebruik van een product kan verschillen afhankelijk van geografische goedkeuringen. De producten van MiniMed die op de Europese markt worden gebracht, voldoen aan de EU- en Britse wetgeving (indien van toepassing) inzake medische apparatuur.

CE-DBA-2600095 ©2026 MiniMed. MiniMed en het MiniMed-logo zijn handelsmerken van MiniMed, Inc. De vorm en het uiterlijk van de sensor, Abbott en het 'a'-logo zijn merken en/of ontwerpen van de Abbott-groep van bedrijven in verschillende gebieden en worden onder licentie gebruikt. Sensorafbeelding ©2026 Abbott. ™* Merknamen van derden zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle andere merken zijn handelsmerken van (een dochteronderneming van) MiniMed.

