

## Ondersteuning, educatie en toegang tot uw persoonlijke gegevens



### StartRight<sup>SM</sup>-programma

- 3 maanden een persoonlijk onboarding-programma met StartRight<sup>SM</sup>-specialisten via e-mail of telefoon
- Toegang tot veelgestelde vragen, educatieve hulpmiddelen en video's over onderwerpen die te maken hebben met diabetes



### Technische ondersteuning & opleidingen

- 24/7 on/offline technische hulplijn
- Hands-on, face-to-face, en van op afstand



### WeCare-portal

- Uitgebreide bibliotheek
- Gepersonaliseerde informatie
- WeCare-blog



### CareLink<sup>TM</sup> Personal

- Altijd toegang tot je persoonlijke gegevens
- Meer inzicht in uw diabetesmanagement

"Ik vind de  
pomp **gemakkelijk te  
gebruiken** en de  
ondersteuning van  
Medtronic en het  
diabeteszorgteam is super  
- **ze staan 24/7 voor je  
klaar** - dat is  
geweldig."

Jouw pomp,  
jouw stijl, jouw manier



Medtronic  
MiniMed<sup>TM</sup>  
Accessoires

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het systeem met SmartGuard<sup>TM</sup>-functie. U moet hiervoor enkele handelingen verrichten. De informatie in dit document is geen medisch advies en mag niet worden gebruikt als een alternatief voor overleg met uw arts. Bespreek indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke bijwerkingen en eventuele verdere informatie met uw zorgverlener.

#### Literatuur

1. Compared to multiple daily injections, according to the STAR 3 clinical study: Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311-320.
- \* De berekening is gebaseerd op de hoeveelheid insuline die op het moment in het lichaam aanwezig is, de hoeveelheid koolhydraten, de huidige bloedglucosewaarde en de doelwaarde, de insuline-koolhydraatratio en de insulinegevoeligheid. Eerst dient de Bolus Wizard juist te worden ingesteld. Gebruikers dienen de hoeveelheid koolhydraten en hun huidige bloedglucosewaarde in te voeren voordat de Bolus Wizard de hoeveelheid insuline die nodig is, kan berekenen.
- \*\* De functionele Stop-functie kan uitsluitend worden gebruikt onder de volgende voorwaarden: de sensorglucosewaarde mag niet meer dan 3,9 mmol/l boven de ondergrens liggen, de verwachting is dat de waarde binnen 30 minuten 1,1 mmol/l boven de ondergrens zal liggen EN de wachttijdperiode van de insulinepomp moet voorbij zijn.
- \*\*\* De functionele Hervat-functie kan uitsluitend worden gebruikt onder de volgende voorwaarden: de sensorglucosewaarde moet 1,1 mmol/l boven de ingestelde ondergrens liggen, de verwachting is dat de waarde binnen 30 minuten 2,2 mmol/l boven de ondergrens zal liggen EN de toediening van insuline moet gedurende minimaal 30 minuten zijn gestopt.
- # Meerdere dagelijkse injecties (3 bolussen en 1 basale insulinetoediening per dag) vereisen 28 injecties per week, t.o.v. één infusiesetvervanging per week met de Medtronic Extended-infusieset.
- ## Raadpleeg de handleiding van de MiniMed<sup>TM</sup> Mobile-app.

## Medtronic

Medtronic Trading NL B.V.  
Larixplein 4  
5616 VB Eindhoven  
Nederland

www.medtronic-diabetes.nl  
Tel. +31 (0)40 711 75 55  
Fax +31 (0)40 711 75 22

UC202200109NL ©2022 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Medtronic en het logo van Medtronic zijn handelsmerken van Medtronic.<sup>TM</sup> Merknamen van derden zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle andere merken zijn handelsmerken van (een dochteronderneming van) Medtronic. ACCU-CHECK EN ACCU-CHEK GUIDE LINK zijn handelsmerken van Roche Diabetes Care. De wettelijke fabrikant van de MiniMed<sup>TM</sup>-infusiesets is Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Østød. 4320 Lejre, Denemarken.

## Medtronic

# Een insulinepomp voor persoonlijk gemak

Veel factoren, zoals voeding, sport en stress, kunnen uw glucosewaarden beïnvloeden. De MiniMed<sup>TM</sup> 740G-insulinepomp kan u helpen uw glucosewaarden beter onder controle te houden.

Voor meer  
controle<sup>1</sup> en  
geavanceerde  
bescherming



De MiniMed<sup>TM</sup> 740G-insulinepomp



## Het MiniMed™ 740G-systeem met Bluetooth®-koppeling



### Guardian™ Sensor 3 & Guardian™ Link 3-Bluetooth®-zender

Meet iedere 5 minuten uw glucosewaarden die draadloos naar uw insulinepomp worden verzonden.



### Bloedglucosemeter

Nauwkeurige<sup>3</sup> testresultaten van de Accu-Chek® Guide Link-bloedglucosemeter worden draadloos naar de pomp verzonden voor een snelle kalibratie van de sensor.



### MiniMed™ 740G-insulinepomp

- Hulp bij het berekenen van uw insulinedosis\* met de Bolus Wizard™.
- Meerdere bolustoedieningen beschikbaar om u te helpen omgaan met een grote variatie in maaltijden<sup>1</sup>.
- Persoonlijke instellingen voor basale waarden en bolussen: zo krijgt u zowel overdag als 's nachts de hoeveelheid insuline die u nodig heeft.


### Insulinetoediening

De Medtronic Extended-infusieset zorgt voor een continue en onopvallende toediening van insuline en is de enige infusieset die tot 7 dagen gedragen kan worden.



### MiniMed™ Mobile-app

U kunt uw glucosewaarden op uw smartphone zien en ze worden automatisch naar uw zorgpartner gestuurd. Beschikbaar voor de meeste iOS- en Android-smartphones<sup>##</sup>.

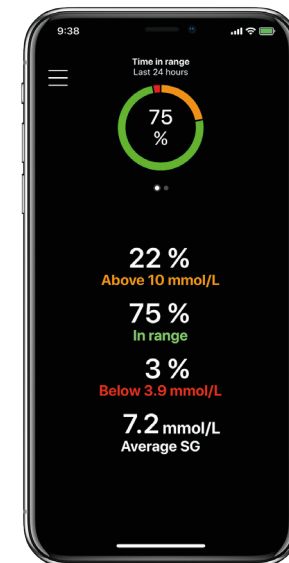

### Ondersteuning therapiemanagement

Upload uw gegevens naar CareLink™ om gemakkelijk uw glucosewaarden te bekijken en deze informatie op afstand te delen met uw zorgverlener.



## De mogelijkheid om uit te breiden met een continue glucosemonitor (CGM)

De MiniMed™ 740G-insulinepomp kan als systeem ook uitgebreid en gecombineerd worden met de Guardian™ Sensor 3 en Guardian™ Link 3-bluetooth-zender. Het MiniMed™ 740G-systeem heeft hetzelfde SmartGuard™-algoritme als het MiniMed™ 640G-systeem.

Het systeem meet dag en nacht om de vijf minuten uw sensorglucose om lage waarden te voorspellen en te voorkomen, 30 minuten voordat ze optreden. De SmartGuard™-technologie zorgt ervoor dat de insulinetoediening stopt voordat u een lage waarde bereikt\*\* en brengt deze weer op gang zodra uw glucosespiegel zich heeft hersteld\*\*\*. Indien u in aanmerking komt voor CGM dan is het MiniMed™ 780G-systeem het meest geschikt vanwege de voordelen van het SmartGuard™-algoritme van de MiniMed™ 780G-insulinepomp en de Guardian™ 4-sensor.

### SmartGuard™-technologie

helpt hypers en hypo's te voorkomen en helpt u tijdig en automatisch uw waarden te herstellen.



Het MiniMed™ 740G-systeem met SmartGuard™-technologie